

WELCH ALLYN CARDIOPERFECT™ HÅNDHOLDT-EKG

Det perfekte valget

En effektiv, håndholdt EKG

Den håndholdte Welch Allyn CardioPerfect CER PDA-EKG er basert på operativsystemet Windows CE (Pocket PC) og lar deg registrere EKG med programvaren til Welch Allyn på en håndholdt PC. Utnytt bekvemligheten ved en transportabel EKG til bruk på veien eller i sykehusets avdelinger.

Welch Allyn håndholdt-EKG

Systemet omfatter programvaren Welch Allyn CardioPerfect CER PDA-EKG, PC tilkobling og en av de to opptakerne til Welch Allyn CardioPerfect. Samlet utgjør dette en svært liten utrustning for registrering, visning og lagring av EKG.

EG kan overføres til programvaren Welch Allyn CardioPerfect(tm) Workstation for ytterligere analyse, lagring, visning og utskrift.

Systemet kan enten kjøpes som et alternativ for de som bruker standardsystemet Welch Allyn CardioPerfect EKG eller som et eget system for nye brukere.

En ekstra fordel med håndholdt EKG er den meget korte tiden for oppstart, sammenliknet med dagens PC.



En kontinuerlig utvikling av utstyr og programvare betyr at Welch Allyn leverer moderne instrumentløsninger for kretsløp, både nå og i framtiden.


WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

WELCH ALLYN CARDIOPERFECT™ HÅNDHOLDT-EKG

Det perfekte valget

Programvaren omfatter tre ulike metoder:

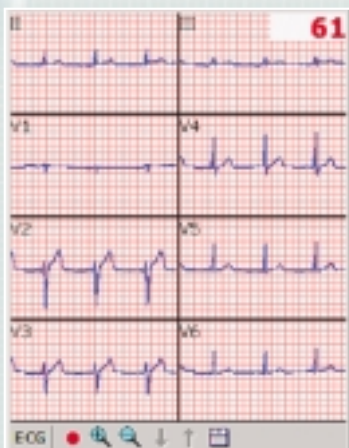


Monitormetoden

brukes for vurdering av kvaliteten til de registreringene man vil se. I noen tilfelle kan den benyttes til langtidsovervåking. Det kan også legges inn pasientdata, eller innstillingene kan endres før registrering med denne metoden.



Vurderingsmetoden

gir mulighet for å bla igjennom samtlige registrerte segmenter av EKG, foreta målinger, redigere pasientdata og tekst, lytte til - eller diktere verbale kommentarer og endre innstillingene.

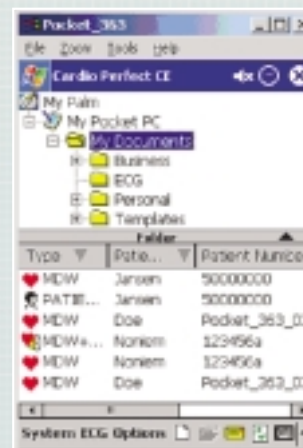

Filbehandlingsmetoden

har visning av alle filer med EKG registreringer, valg av en fil, åpning av en fil for vurdering eller sletting av en fil. Her kan du også opprette nye filer for registrering.

Tekniske data

- Modell PRO (krever separat pasientkabel)
Dimensjoner og vekt: 147 x 108 x 32,5 mm,
312 g (0,7 lbs) inklusive batterier
Strømforsyning: Oppladbart batteri
- Transportabel modell (med integrert pasientkabel)
Dimensjoner og vekt: 200 x 100 x 32 mm, 420 g (0,9 lbs)
Strømforsyning: 9 Volts batteri

Bestillingsdata

POR-CE	Transportabelt EKG system for håndholdt PC inklusive Welch Allyn programvare CardioPerfect Workstation
CER-100	PRO EKG system for håndholdt PC inklusive programvaren Welch Allyn CardioPerfect Workstation
RE-PC-EUR-BAN	PRO hvile-EKG pasientkabel, europeisk merking
RE-PC-USA-BAN	PRO hvile-EKG pasientkabel, amerikansk merking

Programvaren er utviklet for Compaq ipaq, men også andre håndholdte merker vil bli vurdert etter hvert som de kommer på markedet. Den lokale representanten kan gi ytterligere opplysninger.



PRO MODELL



PORTABEL MODELL

Medinor ASA, Nils Hansens Vei 4, PO Box 94 Bryn, Oslo 0611, Norway
Tel: 00 47 22076500 Fax: 00 47 22076505 Email: medinor@medinor.no

Welch Allyn European Customer Services,
Navan Business Park, Dublin Road, Navan, Co. Meath, Republic of Ireland
Tel: 00 353 46 90 67790 Fax: 00 353 46 90 67754

www.welchallyn.com/cardiocontrol



WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

©2003 Welch Allyn, Inc. SM 2535-NOR