



Propaq LT | Makkelijk inzetbare continue monitor

Welch Allyn Propaq® LT

Deze monitor verandert niet hoe u patiënten controleert, maar waar u dat doet.



WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

De Welch Allyn Propaq® LT

Controleer meer patiënten op meer plaatsen dan ooit tevoren .



Betrouwbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid zorgen samen dat u misschien wel over de meest veelzijdige monitor beschikt die momenteel op de markt is.

De Propaq LT is de perfecte monitor voor de hedendaagse snelle ziekenhuisomgeving – waarbij u de mogelijkheid heeft om continue monitoring in ziekenhuizen uit te breiden, daar waar dit voorheen niet mogelijk was door technische complexiteit of hoge kosten. Daar de Propaq LT zo makkelijk te gebruiken en te configureren is, is het de perfecte keuze voor verpleegkundigen op de algemene zorgafdelingen. En met de legendarische Propaq kwaliteit weet u dat het robuust en betrouwbaar genoeg is om te gebruiken in de ED en voor transport tussen de verschillende afdelingen.

Door de draadloze verbinding en spot-checkmodus is het met de Propaq LT alsof u drie monitoren krijgt voor de prijs van één – een ambulante, een voor naast het bed en een voor transport.



Deze monitor kan ingezet worden wanneer – en waar – dit het meest nodig is.




Uitgerust met het optionele Propaq LT grote kleurenscherm en laadstation, is de Propaq LT ideaal te gebruiken als bed- of kleine ingrepen monitor. En door revolutionair ontwerp is de Propaq LT licht genoeg om op een infuusstang te passen, stevig genoeg voor luchttransport en wendbaar genoeg voor pediatrie applicaties. Hierdoor stelt de Propaq LT u in staat om meer patiënten op meer plaatsen dan ooit te monitoren.

AFBEELDING OP WARE GROOTTE:
De Welch Allyn Propaq LT weegt
minder dan twee pond.



Advanced Masimo bevat Signal Identification and Quality Indicator (SIQ) en Perfusion Index (PI), zie onderstaand in tabel

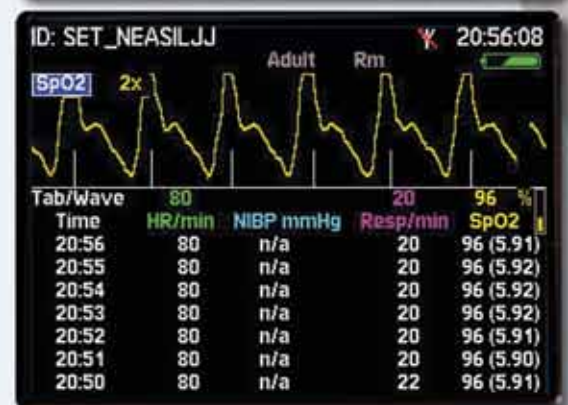

Snel heen en weer schakelen tussen drie weergavemodi die geschikt zijn voor uw zorggebied (vijf keuzemogelijkheden). Op de monitor ziet u grote getallen, en daarboven zijn twee golfpatronen en tabelvormige trends met golfpatroonweergave.

Belangrijkste eigenschappen:

- Welbekende Propaqkwaliteit en duurzaamheid met een schokbestendigheid tot wel 75 g, dit is genoeg om een val vana 2 m hoogte te doorstaan
- Hartritme, 3- of 5-lead ECG, SpO₂, NIBP, ademhaling
- Masimo SET[®] motion-tolerant SpO₂ of Nellcor[®] SpO₂
- Smartcuf[®] motion-tolerant NIBP
- Neonatale, pediatrie en volwassen patiëntenmodi
- Continue monitoring en spot-check modes
- 24-uurs tabulaire en grafische trends
- Kan tot 20 full-disclosure data snapshots opslaan
- Draadloze verbindingsoptie met Welch Allyn Acuity[®] Centraal station via FlexNet[™] 802.11a
- Gecertificeerd voor gebruik in vliegtuig door US Military



Ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van hedendaagse ziekenhuisomgevingen

Optie groot kleurendisplay

De Propaq LT is handig aan te sluiten op een groot kleurendisplay dat u de keuze geeft uit weergavemodi van 4 of 9 wavevormen. Hierdoor is hij perfect voor toepassingen bij het bed of tijdens een ingreep. En door de mogelijkheid het apparaat op een tafel of aan de muur vast te maken heeft u de flexibiliteit om uw grote kleurenmonitor te gebruiken waar u deze het meest nodig hebt. Voor het gebruik met deze functie zijn direct leverbare displays verkrijgbaar.



Kies uit een weergavemodus van 4 of 9 wavevormen en lees eenvoudig cijfers van de vitale functies, wavevormen en alarmlimieten af.



Afbeelding van groot kleurendisplay aan de muur.



print een A4 tabulair trend rapport met de weergave van patientgegevens, nadruk op alarm events, en toegevoegd aan patient dossier, of print snapshot waveforms.

Gebruik makend van de nieuwste technologieën

De Propaq LT communiceert met elke Windows® 2000/XP PC via de USB port. Het staat de gebruiker toe om zelf de monitor en patientdata uit te printen of te exporteren in een zelf geconfigureerd format. Het Propaq LT network via het FlexNet 802.11a naar een Acuity® Central Station wordt een onderdeel van "de flexible monitoring solution". De operator kan kiezen om hun wireless Propaq LT monitors te gebruiken op een dedicated 802.11a network of op een gedeeld 802.11a/b/g network gecombineerd met andere ziekenhuis applicaties.



Klein genoeg om op een nachtkastje te plaatsen, licht genoeg om te dragen, de compacte Propaq LT kan eenvoudig geplaatst worden in het oplaadstation welke aan het bed kan worden gehangen.

Neem voor meer informatie over de Propaq LT contact op met uw plaatselijke verkoper van Welch Allyn.



Alle Propaq monitoren voor vitale functies worden standaard geleverd met Smartcut-technologie, een nieuwe standaard in NIBP-nauwkeurigheid. Deze gepatenteerde software biedt een toonaangevende werking en nauwkeurigheid bij aanwezigheid van bewegingsartefacten.



Deze monitor is goedgekeurd voor gebruik tijdens alle fasen van de vlucht aan boord van de U.S. Army. MIL STD 461E
Army, CE101, CE102, CS101, CS114, CS115, CS116, RE102, RS103.



Voor Masimo puls-oxymetrie mogen uitsluitend Masimo SET SpO₂ sensoren, waaronder "LNOP durable adhesive" en "NR value disposable" sensoren worden gebruikt. Masimo, Masimo SET, LNOP en NR zijn geregistreerde handelsmerken van Masimo Corporation.



Voor de Nellcor puls-oxymetrie-optie mogen uitsluitend Nellcor® puls-oxymetriesensoren, waaronder "Oxisor® // patient-dedicated Adhesive Sensors" worden gebruikt. Nellcor is een geregistreerd handelsmerk van Nellcor Puritan Bennett, Inc.



Welch Allyn Acuity® Central Monitoring Station maakt gebruik van Aruba Mobile Edge Architecture voor de beste in zijn klasse HIPAA security, een superieure voice en data netwerk oplossing en goed beschikbaar voor kritische toepassingen.

Welch Allyn BENELUX

Staalweg 50, 2612 KK DELFT (NL)

Telefoon: 015-7505000, FAX: 015-7505050

E-mail: infoln@welchallyn.com

www.welchallyn.com

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Alle rechten voorbehouden. Acuity, Propaq en Smartcut zijn geregistreerde handelsmerken en FlexNet is een handelsmerk van Welch Allyn. Andere producten en bedrijfsnamen die worden genoemd zijn alleen bedoeld voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke bedrijven zijn.

© 2009 Welch Allyn SM2832NL Rev F