



Propaq LT | Monitorización continua de disposición inmediata

Propaq® LT da Welch Allyn

Um monitor que vai mudar o modo e o local de monitorização dos pacientes.



WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

O Propaq® LT da Welch Allyn

Monitorize mais pacientes em mais locais do que nunca



Fiabilidade, durabilidade e acessibilidade de preço combinadas para lhe disponibilizarem o que talvez seja o monitor mais versátil do mercado actual.

O Propaq LT é o monitor ideal para o ambiente hospitalar dinâmico dos nossos dias, permitindo-lhe ampliar uma monitorização contínua para áreas do hospital onde a complexidade técnica ou o seu custo a tornavam impossível no passado. Devido à sua facilidade de utilização e configuração, o novo Propaq LT é a solução ideal para os enfermeiros e enfermeiras de serviço em pisos de cuidados gerais. E, tendo em conta a qualidade dos nossos produtos Propaq, este monitor apresenta uma robustez e fiabilidade que permitem a sua utilização nos serviços de urgência, bem como o seu transporte entre diferentes departamentos.

Com a sua tecnologia wireless e o modo de controlo local, o Propaq LT equivale a adquirir três monitores – um ambulatório, outro de cabeceira e um terceiro para transporte – pelo preço de um.

O único monitor que poderá ser utilizado onde e quando mais o necessite.



Equipado com um grande ecrã opcional de visualização a cores e base de carga, o Propaq LT é ideal para uso como monitor de cabeceira ou monitor ambulatório. E com seu revolucionário desenho que é suficientemente pequeno para ser colocado na mesa de cabeceira, suficientemente leve para ser ajustado a um suporte de soro, suficientemente resistente para transporte aéreo e suficientemente versátil para uso pediátrico, o Propaq LT oferece-lhe a capacidade de monitorizar mais pacientes em mais lugares que nunca.

APRESENTAÇÃO EM TAMANHO REAL:
O Propaq LT pesa menos de um quilo.




Full - disclosure instantâneo

Teclado de Navegação

Pressão Arterial

Avançadas características de saturação Masimo incluem Identificação de Sinal, Indicador de qualidade (SIQ) e Índice de Perfusão (PI), mostrados abaixo com tendências tabulares com curvas.

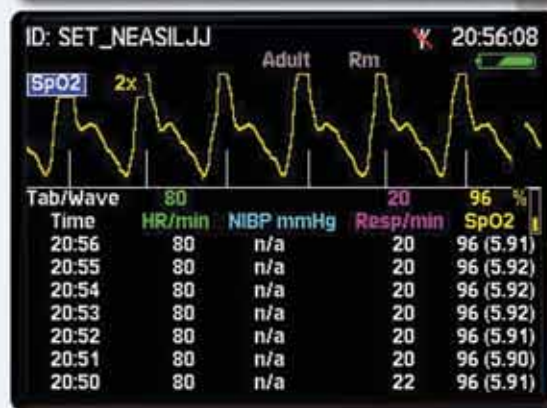

Selecione os vários modos de visualização consoante as necessidades do serviço. Apresentam-se visualizações de valores numéricos grandes, duas curvas e de tendências tabulares com curvas.

Funções Principais:

- Resistente ao choque de até 75g, o suficiente para aguentar uma queda de 1,8 metros
- Frequência cardíaca, ECG de 3 ou 5 derivações, SpO₂, NIBP
- Masimo SET® SpO₂ tolerante ao movimento ou Nellcor® SpO₂
- NIBP Smartcuf® tolerante ao movimento
- Modo adulto, recém-nascidos e pediátrico
- Modos de monitorização contínua e pontual
- Tendências de 24 horas em formato tabular e gráfico
- Memoriza até 20 eventos de Full-Disclosure
- Opção de ligação wireless à Estação Central Acuity® através de FlexNet™ 802.11a
- Certificado pelas Forças Armadas dos EE.UU. para uso em aeronaves com asas fixas e rotativas de qualquer tamanho.



Concebido para satisfazer as necessidades dos actuais ambientes hospitalares

Opção de Ecrã externo de visualização a cores

O Propaq LT pode ser convenientemente ligado a um grande ecrã de visualização a cores, disponibilizando uma selecção de modos de visualização com 4 ou 9 curvas de onda, o que o torna ideal para aplicações junto ao leito do paciente ou em intervenções médicas. Com opções para montagem sobre a mesa ou na parede, o equipamento oferece-lhe flexibilidade suficiente para utilizar o seu ecrã a cores onde seja mais necessário. Podem comprar-se em separado monitores TFT para utilizar consoante as necessidades.



Grande ecrã de visualização a cores com montagem de parede.

Selecione modos de visualização com 4 ou 9 curvas, para poder facilmente visualizar os sinais vitais, as curvas e os limites de alarme.

Grande ecrã de visualização a cores na montagem de parede.



Imprime um relatório de tendências de A4 com dados do paciente, eventos de alarme destacados e anexa o arquivo do paciente ou imprime as curvas das instantâneas do paciente

Inclui as tecnologias mais recentes

O Propaq LT pode estabelecer comunicação com qualquer computador com Windows® 2000/XP através da porta USB, a permitir ao utilizador a personalização do monitor e a imprimir ou exportar os dados do paciente. O Propaq LT conecta-se em rede com a Estação Central Acuity® através da rede FlexNet 802.11a formando parte da solução de monitorização flexível. Os utilizadores podem escolher operar com seus monitores sem fios Propaq LT numa rede 802.11a própria ou numa rede 802.11a/b compartilhada com outros aplicativos do hospital.



Suficientemente pequeno para ser colocado na mesa de cabeceira, suficientemente leve para ser transportado por toda a parte, ou simplesmente acomode-o na base de carga para ser colocado no suporte lateral da cama.

Contacte o seu representante local de vendas da Welch Allyn para obter mais informações sobre o Propaq LT.



Todos os monitores dos sinais vitais Propaq incluem a tecnologia Smartcuf, um novo padrão de precisão de medição não invasiva da pressão arterial (NIBP). Este software patenteado proporciona-lhe um desempenho e precisão sem igual, na presença de artefactos.



Este monitor está aprovado para uso durante todas as fases de um voo em aeronaves das Forças Armadas dos EE.UU.: MIL STD 461E
Forças Armadas: CE101, CE102, CS101, CS114, CS115, CS116, RE102, RS103



Só deverão ser utilizados sensores de SpO₂ Masimo SET, incluindo sensores adesivos duráveis LNOP e sensores descartáveis do valor dos NR, com o dispositivo de oximetria de pulso Masimo. Masimo, Masimo SET, LNOP e NR são marcas comerciais registadas da Masimo Corporation.



Apenas os sensores de oximetria de pulso Nellcor®, incluindo os sensores OxiMax® adesivos, dedicados ao doente, devem ser utilizados com a opção Nellcor de oximetria de pulso. Nellcor é uma marca comercial registada da empresa Nellcor Puritan Bennett Inc.



A Estação Central de Monitorização Acuity® da Welch Allyn utiliza Mobile Edge Architecture da Aruba com a melhor segurança HIPAA, uma solução superior de rede de voz e dados e alta disponibilidade de aplicações críticas.

Welch Allyn European Customer Service,
Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath, Ireland
Telephone: +353 46 906 7790 Fax: +353 46 906 7754

www.welchallyn.com

Alle rettigheder forbeholdes. Acuity, Propaq og Smartcuf er registrerede varemærker og FlexNet er et varemærke tilhørende Welch Allyn.

Andre nævnte produkt- og firmanavne er kun til identifikationsformål og kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive selskaber.

© 2009 Welch Allyn SM2832PT Rev F

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™