



Fås nu med  
Masimo SET®



## Welch Allyn Propaq® LT

Lille og ligger godt i hånden.

Robust og kan klare de barske situationer.

**WelchAllyn®**

Advancing Frontline Care™

# Welch Allyn Propaq® LT.

Monitoren som du kan anvende overalt, når og hvor behovet er størst.

Den er brugervenlig og kombineret med stor holdbarhed og fleksibilitet - en perfekt monitor til dagens krævende udrykningssituationer

Propaq LT er en patient monitor som vejer under 1 kg. Den kan anvendes til adskillige formål, den er fleksibel og kan anvendes i alle typer terræn og i alle miljøer. Propaq LT er så kompakt, at den kan ligge i en håndflade. Den anvender den gennemtestede Propaqteknologi og sikrer de præcise målinger af vitale parametre, som du har brug for. Welch Allyn Smartcuff NIBP-teknologi giver nøjagtig måling under bevægelse.

Den er testet til at kunne tåle et fald fra 2 meters højde og kan tåle alle de knubs og skrammer, som er en del af hverdagen, og alligevel blive ved med at sikre en præcis information om patientens vitale parametre. Propaq LT kan også pakkes sammen med en Welch Allyn AED 10™ i en og samme pose, hvorved du får en stærk kombination af en monitor og en defibrillator, som er nem at bære.

Det robuste, lette ambulancebeslag giver ambulancefolkene hurtig og let adgang til apparatet, samtidig med sikker overvågning under transporten.

På grund af sin lave vægt er den bærbare Propaq LT ideel til ethvert terræn og miljø, også selv om du har andet udstyr, du skal bære på.







VIST I FAKTISK STØRRELSE:  
Welch Allyn Propaq LT kan modstå stød på op til 75 g.

Full-Disclosure Snapshot  
Blodtryk

De avancerede Masimo-funktioner omfatter Signal Identification og Quality Indicator (SIQ) og Perfusion Index (PI), der vises herunder som tendens i tabelform sammen med visning af waveform.

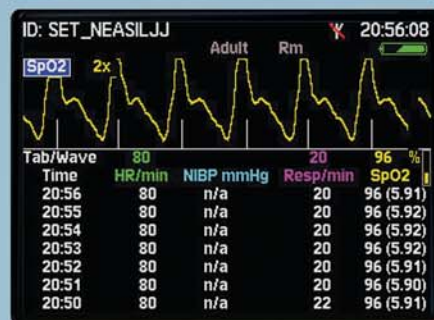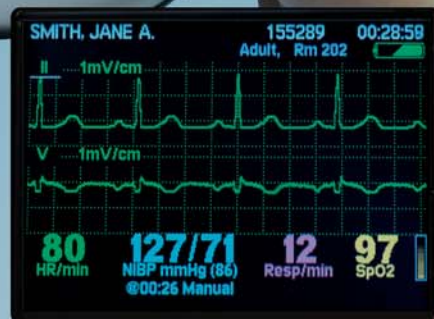

Brug AED 10 sammen med Propaq LT til overvågning af patienter, så du samtidig er forberedt i tilfælde af, at der opstår hjertestop.



## Vigtige funktioner


- Vejer cirka 1 kg
- Tåler stød på op til 75 g – tilstrækkeligt til at kunne holde til et fald på 2 meter
- Batterilevetid på op til 24 timer
- Puls, 3- eller 5-aflednings EKG, SpO<sub>2</sub>, NIBP og respiration
- Masimo SET® bevægelsestolerant SpO<sub>2</sub> eller Nellcor® SpO<sub>2</sub>
- Smartcuf® bevægelsestolerant NIBP
- Program til neonatale, pædiatriske og voksne patienter
- Kontinueret monitorering og mulighed for spot-check
- Bagbelyst LCD farvedisplay, timerstyring og mulighed for at slukke displayet
- Hurtig og intuitiv betjening i stil med et videokamera
- 24-timers tabel- og grafisk trending med et-minuts samplingfrekvens
- Plads til at gemme op til 20 full-disclosure data-snapshots
- Overfører oplysninger til en PC for udskrivning
- Mulighed for stort farvedisplay

Mulighed for hurtigt at skifte mellem den af tre visningstilstande, som er korrekt for det pågældende plejeområde (der er fem at vælge imellem). Monitoren viser store tal og derover to displays med waveform og tendens i tabelform med waveform.

## Ambulancebeslag

Starmed-ambulancemonteringsystem fastgør Propaq LT sikkert under transport.

- Let, robust løsning til montering i ambulance til brug i EMS-miljøer og militære miljøer
- Giver hurtig, let adgang
- Opbeholder sikker overvågning under transport
- Testet og certificeret i henhold til EN 1789 (stød og vibration) og CS 27.561 (forhold under nødlandning)

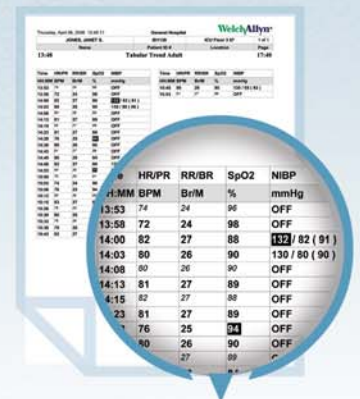

### En kraftfuld kombination

Welch Allyn Propaq LT og Welch Allyn AED 10™ – en kraftfuld monitor/defibrillator-kombination som er nem at bære i en enkelt pose.

### Indeholder den seneste teknologi

Propaq LT kan kommunikere med enhver Windows® 2000/XP PC via en USB-port, hvilket gør det muligt at brugerkonfigurere enheden, kontinuerligt at overvåge patienten og udskrive tabulære trends og snapshots af patientdata. Tendens i tabelform og billeder af patientdata kan konverteres til PDF-filer med henblik på enkel integration i elektroniske patientjournaler.

Udskriv en A4 tendensrapport i tabelform til visning af patientdata, fremhæv alarmhændelser og vedhæft dem til patientjournaler eller udskriv billeder af patientens waveforms.

Kontakt den lokale Welch Allyn salgsrepræsentant for yderligere oplysninger om Welch Allyn Propaq LT.



Alle Propaq-monitoren til overvågning af vitale parametre leveres med SmartCuf teknologi, en ny standard inden for NIBP-nøjagtighed. Denne patenterede software forbedrer NIBP-resultaterne og nøjagtigheden i forbindelse med bevægelses-arterfakter.



Denne monitor er godkendt til brug i alle faser af flytransport om bord på U.S. Army-fly.  
MIL STD 461E  
Army: CE101, CE102, CS101, CS114, CS115, CS116, RE102, RE103



Kun Masimo SET SpO<sub>2</sub> – følere, herunder LNCS-kabler og NR-engangsfølere, må anvendes sammen med Masimo pulsoximetri. Masimo, Masimo SET, LNCS og NR er registrerede varemærker tilhørende Masimo Corporation.



Kun Nellcor® pulsoximetrifølere, herunder OxiMax® patient-dedikerede klæbende følere, må anvendes sammen med Nellcor-pulsoximetri Nellcor er et registreret varemærke tilhørende Nellcor Puritan Bennett Inc.

Welch Allyn European Customer Services,  
Navan Business Park, Dublin Road, Navan, Co. Meath, Republic of Ireland  
Tel: +353 46 90 67790 Fax: +353 46 90 67754  
www.welchallyn.com

Kivex  
Usserød Kongevej 157 DK-2970 Hørsholm  
Tel: +45 4517 0600 Fax: +45 4557 0188  
e-mail: kivex@kivex.dk



Propaq LT ambulancemonteringsbeslag er fremstillet af Starmed for Welch Allyn Propaq LT



Advancing Frontline Care™