



Ahora Disponible con
Masimo SET®



Propaq® LT de Welch Allyn

Lo suficientemente pequeño para caber en la palma de la mano.

Lo suficientemente robusto para rendir incluso en las situaciones más difíciles.

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Propaq[®] LT de Welch Allyn.

El monitor que podrá utilizar cuando,
y donde, más lo necesite.

La facilidad de uso, la durabilidad y la flexibilidad se combinan para ofrecerle el monitor perfecto para las situaciones cotidianas donde se requiera una respuesta de urgencia.

Pesa menos de 1 kg, el Propaq LT es un monitor de paciente multiparámetro lo suficientemente flexible para utilizarse en todo tipo de terreno y entornos. Lo suficientemente compacto para caber en la palma de la mano, el Propaq LT utiliza la sólida y duradera tecnología Propaq, demostrada durante años, para monitorizar y facilitar las lecturas de constantes vitales exactas que necesite. Y con la tecnología de PANI Smartcuf[®] de Welch Allyn que ofrece lecturas precisas incluso con movimiento.

Y, como se ha sometido a pruebas para resistir una caída de 2 metros, puede soportar con facilidad todos los golpes e impactos que forman parte del día a día y aun así facilitar información exacta sobre las constantes vitales de los pacientes. Y aun más, el Propaq LT puede llevarse con un AED 10[™] de Welch Allyn en una sola bolsa, proporcionándole una combinación potente de monitor/desfibrilador, fácil de transportar.

El Montaje de Ambulancia robusto y liviano ofrece al personal de emergencias acceso rápido y fácil al equipo a la vez que mantiene segura la monitorización durante el transporte.

El Propaq LT ligero y portátil es ideal para cualquier terreno o entorno, incluso cuando tenga que llevar otros equipos.






PRESENTACIÓN EN TAMAÑO REAL: El Propaq LT de Welch Allyn es resistente a choques de hasta 75 g.

Modos de visualización Reajustar alarma/silencio

Teclado para navegación Presión arterial

Instantánea de Full Disclosure

Avanzadas características de saturación Masimo que incluyen Identificación de Señal, Indicador de Calidad (SIQ) e Índice de Perfusión (PI), enseñados abajo con tendencias tabulares con curvas.

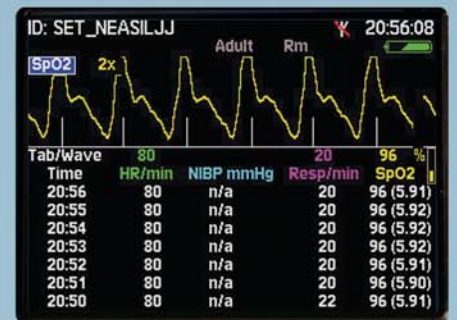

Se puede cambiar con rapidez entre tres modos de visualización apropiados según el área de atención sanitaria (hay cinco para elegir). Se muestran en el monitor valores numéricos grandes, y arriba visualización en el monitor de dos curvas y tendencias tabulares con con curva.

Características claves

- Pesa aproximadamente 1 kg
- Resistente a choques de hasta 75 g – suficiente para soportar una caída de 2 metros
- Autonomía con batería de hasta 24 horas
- Frecuencia cardíaca, ECG de 3 ó 5 derivaciones, SpO₂, PANI y respiración
- SpO₂ Masimo SET® tolerante al movimiento o Nellcor® SpO₂
- PANI Smartcuf® tolerante al movimiento
- Modos de paciente neonatal, pediátrico y adulto
- Modos de monitorización continua y comprobaciones rápidas (spot check)
- Pantalla de LCD a color retroiluminada, apagado automático de la pantalla y controles de bloqueo
- Controles tipo videocámara rápidos e intuitivos
- Tendencias gráficas y tabulares de 24 horas con una velocidad de muestreo de 1 minuto
- Almacena hasta 20 instantáneas de datos de Full Disclosure
- Transfiere la información a un PC para imprimir
- Opción de pantalla a color grande

Utilice el AED 10 en combinación con el Propaq LT para monitorizar a los pacientes y asimismo estar preparado en caso de parada cardíaca.



Montaje de Ambulancia

El sistema de montaje de ambulancia Starmed sujeta el Propaq LT de forma segura durante el transporte.

- Solución de montaje a ambulancia robusto y liviano para uso en Servicios de Emergencias y entornos militares
- Ofrece acceso rápido y fácil
- Mantiene la monitorización segura durante el transporte
- Probada y certificada por la EN 1789 (Caída y Vibración) y por la CS 27.561 (Condiciones de Aterrizaje de Emergencia)



Una combinación potente

Propaq LT de Welch Allyn y AED 10™ de Welch Allyn – una combinación potente de monitor/desfibrilador fácil de transportar en una sola bolsa.



Incorporación de lo último en tecnología

El Propaq LT puede comunicarse con cualquier PC con Windows® 2000/XP a través de un puerto USB, lo que le permite configurar el monitor a medida e imprimir las tendencias tabulares y las instantáneas de los datos y curvas del paciente. Las tendencias tabulares y las instantáneas de datos del paciente pueden ser convertidas en archivos PDF para su fácil integración en los Registro Médicos Electrónicos (EMR).

Time	HR/PR	RR/BR	SpO2	NIBP
MM	BPM	Br/M	%	mmHg
13:53	74	24	98	OFF
13:58	72	24	98	OFF
14:00	82	27	88	122 / 82 (91)
14:03	80	26	90	130 / 80 (90)
14:08	80	26	90	OFF
14:13	81	27	89	OFF
4:15	82	27	88	OFF
23	81	27	89	OFF
76	25	91	OFF	
80	26	90	OFF	
27	89			

Imprima un informe de tendencia tabular de 20 x 28 cm (aprox.) para mostrar los datos del paciente, resaltar eventos de alarma, y adjuntar a los datos del paciente, o imprima las curvas de instantáneas del paciente.

Para más información sobre el Propaq LT de Welch Allyn, póngase en contacto con su Distribuidor autorizado de productos Welch Allyn o visite www.welchallyn.es



Todos los monitores de constantes vitales Propaq vienen con tecnología Smartcut, una nueva referencia en la exactitud de PANI. Este software patentado ofrece un rendimiento y una exactitud líderes de la industria en presencia de artefactos de movimiento.



Este monitor está aprobado para ser usado durante todas las fases de un vuelo a bordo de aeronaves militares de los EE.UU. MIL STD 461E Army: CE101, CE102, CS101, CS114, CS115, CS116, RE102, RE103



Sólo deben emplearse los sensores SpO₂ de Masimo SET, incluyendo los sensores adhesivos reutilizables LNOP y los sensores desechables NR con la opción de pulsioximetría Masimo. Masimo, Masimo SET, LNOP y NR son marcas registradas de Masimo Corporation.



Con la opción de pulsioximetría de Nellcor, sólo deberán utilizarse sensores de pulsioximetría de NELLCOR®, incluyendo sensores adhesivos específicos al paciente OxiMax®. NELLCOR es una marca comercial registrada de Nellcor Puritan Bennett Inc.



Advancing Frontline Care™



El Montaje de Ambulancia para Propaq LT es fabricado por Starmed exclusivamente para el Propaq LT de Welch Allyn.

Welch Allyn Iberia
General Varela 35, planta 2ª, oficina 10-11, 28020 Madrid, España,
Tel: +34 91 2990376 Fax: +34 91 4252679

www.welchallyn.es