



Désormais
disponible avec
Masimo SET®



Le Propaq® LT de Welch Allyn

Assez petit pour tenir dans le creux de la main.
Assez robuste pour fonctionner même dans les
situations les plus délicates.

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Le Propaq® LT de Welch Allyn.

Le seul moniteur que vous pouvez utiliser où et quand vous en avez le plus besoin.


Simple d'utilisation, résistant et flexible, c'est un moniteur parfaitement adapté aux situations d'urgence actuelles.

Pesant moins de 1 kg, le Propaq® LT est un moniteur multiparamétrique qui présente une flexibilité suffisante pour être utilisé sur tous types de terrains et d'environnements. Son design compact permet de le tenir dans le creux de votre main. Le Propaq® LT est doté de la technologie Propaq® résistante et éprouvée qui vous fournit les relevés des paramètres vitaux dont vous avez besoin. De plus, la technologie PNI Welch Allyn Smartcuf® fournit des mesures précises même en mouvement.

Testé pour résister à une chute de 1,80 mètre, il peut endurer facilement tous les chocs et secousses survenant régulièrement dans votre travail quotidien et vous fournit ainsi constamment des informations vitales précises du patient. Autre avantage, le Propaq® LT peut être rangé dans la même sacoche que le défibrillateur semi automatique AED 10™ de Welch Allyn, et vous bénéficiez ainsi d'un moniteur/défibrillateur performant facile à transporter.

Le montage ambulance robuste et léger permet aux secouristes un accès rapide et facile à l'appareil tout en maintenant une surveillance sûre et sécurisée durant le transport.

Le Propaq® LT léger et portatif est idéal pour une utilisation sur tous types de terrains et d'environnements, même si vous avez d'autres équipements à transporter.


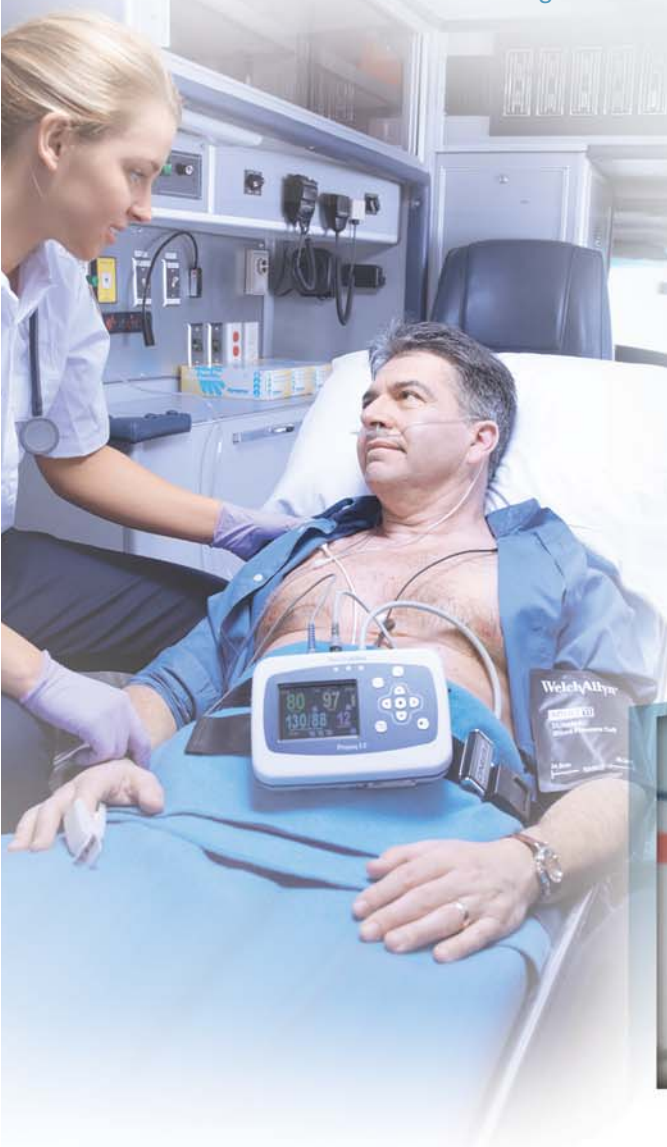




REPRÉSENTÉ EN TAILLE RÉELLE : Le Propaq® LT de Welch Allyn est résistant aux chocs jusqu'à 75 g.

La nouvelle technologie Masimo inclut l'Identification du Signal, l'Indicateur de Qualité du Signal et l'Indice de Perfusion montrés dans le tableau des tendances ci-dessous avec les tracés.

Capture d'événements Clavier de navigation Pression artérielle

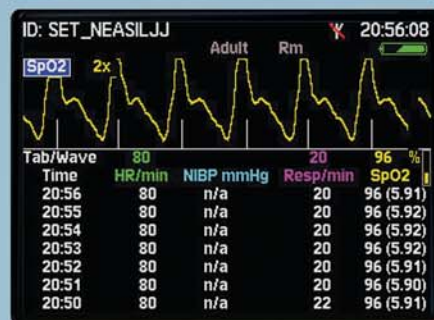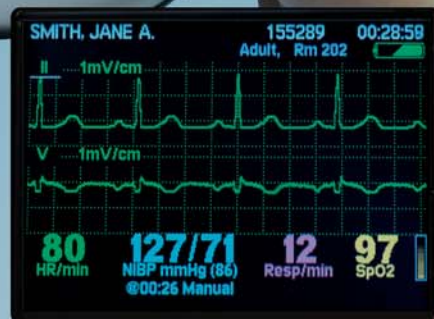

Utilisez l'AED 10™ en combinaison avec le Propaq® LT pour surveiller vos patients et soyez ainsi prêt à réagir en cas d'arrêt cardiaque.



Principales caractéristiques


- Pèse moins d'un kilo
- Résiste aux chocs jusqu'à 75 g – suffisamment pour résister à une chute de 1,80 mètre
- Autonomie de 24 heures
- Fréquence cardiaque, ECG 3 ou 5 dérivations, SpO₂, PNI et respiration
- SpO₂ Masimo SET® motion-tolerant ou SpO₂ Nellcor®
- PNI Smartcut® motion-tolerant
- Modes nouveau-né, enfant et adulte
- Modes monitoring continu ou prise de constantes
- Ecran couleur à cristaux liquides rétroéclairé, temporisation d'affichage et verrouillage du clavier
- Commandes rapides et intuitives, comme sur un caméscope
- Tendances tabulaires et graphiques sur 24 heures avec un taux d'échantillonnage d'une minute
- Enregistre jusqu'à 20 événements en temps réel sur tous les paramètres monitorés
- Transfert d'informations vers un PC pour impression
- Ecran couleur grand format en option

Basculez rapidement entre trois modes d'affichage adaptés à votre service de soins (cinq modes au choix). Comme montré sur le moniteur, les valeurs numériques sont affichées en grands caractères, et au-dessus sont affichées deux courbes et les tendances tabulaires avec les courbes.

Montage Ambulance

Le montage ambulance Starmed fixe solidement le Propaq® LT durant le transport.

- Solution de montage ambulance légère et robuste pour utilisation en environnements d'urgences et militaires.
- Permet un accès rapide et facile
- Maintient une surveillance pendant le transport sûre et sécurisée
- Testé et certifié pour les normes EN 1789 (choc et vibration) et CS 27.561 (conditions d'atterrissage d'urgence)

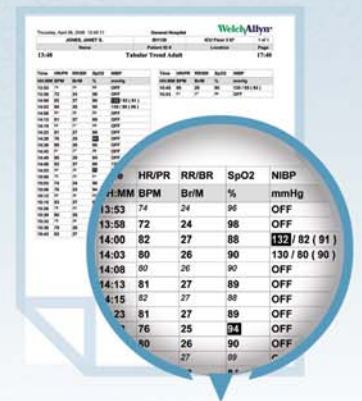

Une combinaison performante

Propaq® LT de Welch Allyn et AED 10™ de Welch Allyn – une combinaison performante moniteur/défibrillateur facile à transporter dans une même sacoche.

Intégration des technologies les plus récentes

Le Propaq® LT peut communiquer avec tout ordinateur fonctionnant sous Windows® 2000/XP doté d'un port USB, vous permettant de personnaliser l'appareil, de surveiller un patient en continu et d'imprimer les tendances tabulaires ainsi que les événements mémorisés des patients. Les tendances tabulaires et les impressions instantanées des données d'un patient peuvent être converties en fichiers PDF pour une intégration plus facile vers les Dossiers Médicaux Patients (DMP).

Imprime un rapport de tendances tabulaires A4 pour visualiser les données patient, affiche les événements d'alarmes en surbrillance, et envoie vers les dossiers médicaux informatisés ou imprime les courbes instantanées des patients.

Pour plus d'informations sur le Propaq® LT de Welch Allyn, contactez votre représentant local Welch Allyn ou consultez notre site internet www.welchallyn.com



Tous les moniteurs multiparamétriques Propaq® sont équipés de la Technologie Smartcuf®, une nouvelle référence dans la précision de mesures des PNI. Ce logiciel breveté améliore les performances et la précision des mesures des PNI en présence d'artéfacts de mouvement.



Ce moniteur est validé par l'Armée Américaine pour l'utilisation en vol durant toutes les phases de vol.
MIL STD 461E
Army: CE101, CE102, CS101, CS114, CS115, CS116, RE102, RE103



Seuls les capteurs de saturation Masimo SET®, incluant les câbles LNCS et les capteurs usage unique NR, doivent être utilisés avec l'option de saturation Masimo. Masimo, Masimo SET, LNCS, et NR sont des marques déposées de la société Masimo.



Seuls les capteurs de saturation Nellcor®, incluant les capteurs adhésifs patient unique Oximax®, doivent être utilisés avec l'option de saturation Nellcor®. Nellcor® est une marque déposée de la société Nellcor Puritan Bennett Inc.

Welch Allyn France
Immeuble Le Galilée, 10 rue Fontaine Rouge
Val d'Europe, 77700 CHESSY
Tél.: 01 60 09 33 66 Fax: 01 60 09 67 97
www.welchallyn.com

Welch Allyn BENELUX
Staalweg 50, 2612 KK DELFT (NL)
Telefoon: 015-7505000
FAX: 015-7505050



Le Montage Ambulance pour Propaq® LT est fabriqué exclusivement par la société Starmed pour le Propaq® LT Welch Allyn.



Advancing Frontline Care™