



Nu beschikbaar met
Masimo SET®



De Welch Allyn Propaq® LT

Zo klein dat hij in de palm van uw hand past.
Zo robuust dat hij zelfs in de moeilijkste situaties
kan functioneren.

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

De Welch Allyn Propaq® LT.

De enige monitor die u wanneer en waar u hem het meeste nodig hebt, kunt gebruiken.

De combinatie van gebruiksgemak, duurzaamheid en flexibiliteit geven u de perfecte monitor voor de noodsituaties van vandaag.

De Propaq LT weegt minder dan 1 kg en is een multifunctionele patiëntenmonitor die flexibel genoeg is om gebruikt te kunnen worden op verschillende types terrein en in allerlei omgevingen. De Propaq LT is compact genoeg om in de palm van uw hand te passen; hij maakt gebruik van bewezen, duurzame Propaqtechnologie om u de accurate vitale functiewaarden te geven die u nodig hebt. De Welch Allyn Smartcuf NIBP technologie zorgt voor nauwkeurige werking bij aanwezigheid van bewegingsartefacten.

De monitor kan een val van 2 meter weerstaan en kan dus met gemak alle schokken en stoten, die deel uitmaken van uw normale werkdag, verdragen en u niettemin accurate informatie geven over de vitale functies van uw patiënt. Bovendien kan de Propaq LT samen met een Welch Allyn AED 10™ verpakt worden in één tas, waardoor u kunt beschikken over een krachtige combinatie van een monitor en een defibrillator die gemakkelijk te dragen is.

De robuuste en lichte ambulante toepassing verschaft zorgverleners snel en makkelijk toegang tot de monitor én het draagt bij tot het veilige transport tijdens het monitoren

De lichtgewicht, draagbare Propaq LT is ideaal voor ieder terrein en elke omgeving, zelfs als u andere apparatuur moet dragen.






OP WERKELIJKE GROOTTE WEERGEGEVEN:
De Welch Allyn Propaq LT beschikt over een schokbestendigheid van maximaal 75 g.

Weergavemodi
Alarm uit/
opnieuw instellen

Propaq LT

Advance Masimo bevat Signal Identification and Quality Indicator (SIQ) en Perfusion Index (PI), zie onderstaand in tabel:

Snapshot volledige informatie
Navigatiepaneel
Bloeddruk

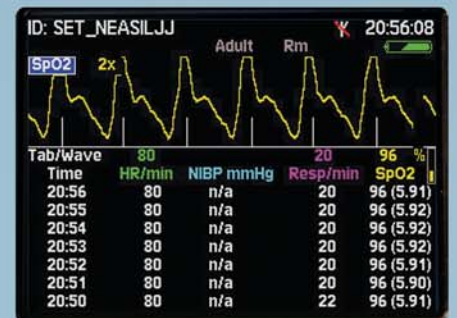

Hoofdkenmerken

- Weegt ongeveer 1 kg
- Schokbestendig tot maximaal 75 g – genoeg om een val van 2 meter te weerstaan
- Levensduur batterij maximaal 24 uur
- Hartslag, ECG met 3- of 5 afleidingen, SpO₂, NIBP en ademhaling
- Masimo SET® motion-tolerant SpO₂ of Nellcor® SpO₂
- Smartcuf® motion-tolerant NIBP
- Modi voor neonatale, pediatrische en volwassen patiënten
- Modi voor continue bewaking en steekproefgewijze bewaking
- Kleuren LCD-scherm met bedieningsknoppen voor backlight, display timeout en blokkering
- Snelle en intuïtieve camcorderachtige bedieningsknoppen
- 24-uurs trendgegevens in tabulaire en grafische vorm met een bemonsteringsfrequentie van één minuut
- Opslag van maximaal 20 snapshots met volledige gegevens
- Kan informatie naar een PC sturen om af te drukken
- Groot kleurenschermoptie

Gebruik de AED 10 in combinatie met de Propaq LT om uw patiënten te bewaken en voorbereid te zijn op een eventuele hartstilstand.



Schakel snel tussen drie weergavemodi voor uw zorggebied (vijf modi in totaal). Op de monitor zijn de getallen groot weergegeven, en daarboven zijn twee golfpatronen en tabelvormige trends met golfpatroonweergave.

Ambulante toepassing

De Starmed bevestigingsbeugel voor in de ambulance zorgt ervoor dat de Propaq LT stevig vastzit tijdens transport.

- Lichte en robuuste ambulante toepassing voor gebruik in ziekenhuis- en militaire omgeving
- Verschaft snel en makkelijk toegang tot de monitor
- Handhaaft het veilige transport tijdens het monitoren
- Getest en gecertificeerd voor EN1789 (Schok en Trilling) en CS 27.561 (Emergency Landing Conditions)




Een krachtige combo

Welch Allyn Propaq LT en Welch Allyn AED 10™ – een krachtige combinatie van een monitor en een defibrillator die gemakkelijk te vervoeren zijn in één tas.



Bevat de nieuwste technologieën

De Propaq LT kan met elke Windows® 2000/XP PC via een USB-poort communiceren, waardoor u het apparaat naar eigen behoefte kunt configureren, een patiënt continu kunt bewaken en tabulaire trends en snapshots van patiëntgegevens kunt afdrukken. Trends in tabelvorm en snapshots van patiëntendata kunnen geconverteerd worden naar PDF bestanden voor een eenvoudige integratie in Electronische Medische Records (EMR's).

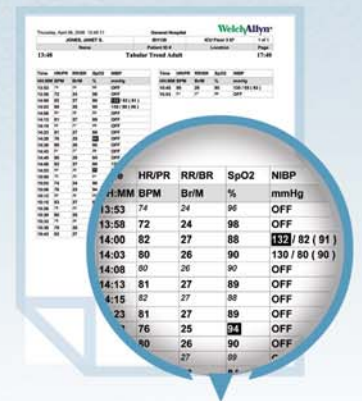

Print tabulaire trends met patiëntgegevens, inclusief alarmverschrijvingen en de mogelijkheid tot het toevoegen aan Electronische Medische Records (EMR's), en de mogelijkheid tot het printen van de snapshots van de grafische weergave van de medische data

Neem voor meer informatie over de Welch Allyn Propaq LT contact op met uw plaatselijke verkoopvertegenwoordiger van Welch Allyn BENELUX of neem contact op via telefoonnummer +31 15 750 5000 als u met een medewerker van de klantenservice wilt spreken.



Alle Propaq monitoren, voor het meten van vitale functies, worden standaard geleverd met Smartcut technologie, een nieuwe standaard in NIBP-nauwkeurigheid. Deze gepatenteerde software biedt een toonaangevende werking en nauwkeurigheid bij aanwezigheid van bewegingsartefacten.



Deze monitor is goedgekeurd voor gebruik tijdens alle vluchtfasen aan boord U.S. Militaire vliegtuigen MIL STD 461E Army: CE101, CE102, CS101, CS114, CS115, CS116, RE102, RE103



Alleen Masimo SET SpO₂ sensoren, inclusief LNCS serie kabels en 'NR value' wegwerpsensoren, kunnen gebruikt worden met Masimo pulse oximetrie. Masimo, Masimo SET, LNCS en NR zijn geregistreerde handelsmerken van de Masimo Corporation



U mag uitsluitend Nellcor® pulse-oximetriesensoren gebruiken met de optie Nellcor pulse-oximetrie, inclusief OxiMax® adhesieve sensoren voor patiënten. Nellcor is een geregistreerd handelsmerk van Nellcor Puritan Bennett Inc.

Welch Allyn BENELUX
Staalweg 50, 2612 KK DELFT (NL)
Telefoon: 015-7505000, FAX: 015-7505050
E-mail: info@welchallyn.com



De bevestigingsbeugel voor in de ambulance is exclusief gefabriceerd door Starmed voor de Welch Allyn Propaq LT monitor



Advancing Frontline Care™