



## Stéthoscopes Welch Allyn

Écoutez la différence offerte par les leaders dans le domaine des soins et du diagnostic



ÉLECTRONIQUE



CARDIOLOGIE



DIAGNOSTIC GÉNÉRAL



JETABLE

**WelchAllyn**<sup>®</sup>

Advancing Frontline Care<sup>™</sup>



## Pourquoi Welch Allyn ?

Depuis plus de 100 ans, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir des performances et une qualité exceptionnelles à travers chaque dispositif Welch Allyn. Notre gamme complète de stéthoscopes ne fait pas exception à cette règle. Trois éléments clés différencient les stéthoscopes Welch Allyn de ceux de nos concurrents : meilleure performance, qualité supérieure et valeur ajoutée.

> **Performance** : les stéthoscopes de cardiologie Welch Allyn Harvey™ et Elite® ont été conçus par le Dr Proctor Harvey, le premier et le seul « maître » en cardiologie consacré par le Collège américain de cardiologie. Le Dr Harvey a conçu ces stéthoscopes pour accentuer les bruits d'éjection haute fréquence plus importants, les clics et les souffles systoliques.

Les stéthoscopes Harvey et Elite respectent également les recommandations de l'American Heart Association (AHA) qui stipulent qu'un stéthoscope doit comprendre une membrane (pour les sons haute fréquence) et une cloche (pour les sons basse fréquence).

> **Qualité** : les stéthoscopes de cardiologie Welch Allyn sont robustes et accompagnés de garanties qui dépassent généralement celles des modèles concurrents de deux ans ou plus.

> **Valeur** : les stéthoscopes Welch Allyn Harvey et Elite sont transformables et comprennent à la fois une membrane pédiatrique et une membrane pour adulte. C'est comme si vous aviez deux stéthoscopes pour le prix d'un.

## Welch Allyn — Une gamme complète de stéthoscopes pour répondre à vos besoins uniques :

Type	Nom du produit	Professeur	Étudiant	Cardiologue	Médecin généraliste	Infirmière		Auscultation	Examen général	Pression artérielle
Électronique	Stéthoscope électronique Elite	•	•	•	•			•	•	
Cardiologie	Stéthoscope triple pavillon Harvey DLX	•	•	•				•		
	Stéthoscope double pavillon Harvey DLX	•	•	•	•			•		
	Stéthoscope Harvey Elite	•	•	•	•	•		•	•	
Diagnostic général	Stéthoscope professionnel				•	•			•	•
	Planoscop 40					•			•	•
	Duophon 40					•			•	•
Jetable	Uniscope jetable					•		•	•	

## Stéthoscope électronique Elite® avec technologie SensorTech™ Entendre plus et entendre mieux: c'est ce dont vous avez besoin.

Le stéthoscope électronique Elite de Welch Allyn doté d'un capteur vous permet de recueillir les sons de manière précise, en minimisant les vibrations, la résonance et la perte sonore. Détectez facilement les souffles diastoliques et les sons pulmonaires aigus non perceptibles avec d'autres stéthoscopes.

### Accessoires



5079-430 Logiciel analyseur — Enregistrement, lecture, analyse, stockage et partage des fichiers depuis votre PC.



5079-401 Répartiteur — Partagez ce que vous entendez avec plus de cinq personnes en même temps.

5079-405 Stéthoscope électronique Elite



Bouton marche / arrêt avec fonction minuterie pour économiser la batterie

Le commutateur de filtre à deux positions vous permet de passer du mode cloche au mode membrane



Le système de haut-parleur breveté permet une transmission optimale du son

Un an de garantie

Les branches et embouts auriculaires réglables garantissent le confort tout au long de la journée

La tension du ressort de la branche est réglable pour votre confort personnel

Sans latex

5079-405 Stéthoscope électronique Elite


Le capteur de pression encastré directionnel permet une meilleure reproduction du son

Port câble externe pour co-écoute et connexion à un PC

La batterie lithium ion longue durée dure jusqu'à 140 heures

### Quels sont les avantages de la technologie SensorTech ?

La technologie SensorTech a véritablement perfectionné l'art d'enregistrer, de transmettre et d'amplifier les ondes sonores. Le capteur intercepte les sons corporels sans envoyer de signal ou d'énergie au corps du patient. Les filtres de fréquence prédéfinis du stéthoscope vous permettent d'entendre les types de sons qui peuvent améliorer votre capacité de diagnostic.

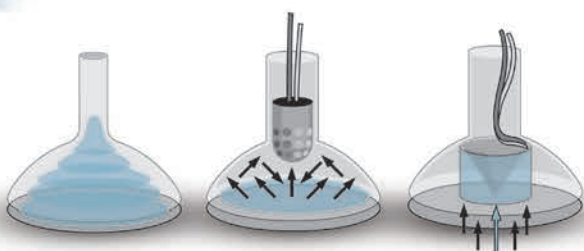

Stéthoscope conventionnel

Stéthoscope amplifié

Stéthoscope à capteur électronique Elite


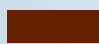

### Positionnement du capteur de pression

Le capteur électronique Welch Allyn Elite se place à la surface du corps du patient pour se concentrer davantage sur les sons, tout en éliminant les vibrations non désirées, la résonance et la perte de son.

## Stéthoscope Harvey™ DLX




Les stéthoscopes de cardiologie Harvey DLX ont été développés par l'éminent Dr Proctor Harvey dans le but de détecter des sons cardiaques haute fréquence extrêmement importants comme des clics, des souffles et des bruits d'éjection. Ils sont garantis 10 ans et sont fournis avec une membrane pédiatrique et une membrane pour adulte interchangeables. Les stéthoscopes Harvey DLX sont conçus pour accentuer les sons avec une précision et une netteté sans égal.

### Stéthoscopes Harvey™ DLX double pavillon — 71 cm (28 pouces)

	5079-325	Noir
	5079-326	Bordeaux
	5079-327	Bleu marine

Le ressort trois sections de la branche enveloppé dans du polyuréthane permet d'ajuster la taille en évitant la casse
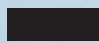
### Stéthoscopes Harvey™ DLX triple pavillon — 71 cm (28 pouces)

	5079-321	Noir
	5079-322	Bordeaux
	5079-323	Bleu marine

Nouvelle longueur, plus de 71 cm (28 pouces)

Branches orientables et embouts auriculaires étanches et interchangeables pour votre confort

Cloche (sons cardiaques et souffles basse et moyenne fréquence)

Pavillons pédiatriques disponibles

Pavillons et branches en laiton plaqué chromé

Sans latex

5079-327 Stéthoscope Harvey DLX, marine



**Membrane plate** — La membrane unique et encastrée est optimisée pour la détection de sons cardiaques de plus haute fréquence extrêmement importants comme les souffles, les clics et les sons d'éjection.



**Membrane ondulée** — La membrane ondulée est particulièrement utile pour détecter les sons basse fréquence, les ronronnements et les galops.



**Modèles triple pavillon** — Pour une flexibilité et une efficacité complète, une cloche, une membrane plate et une membrane ondulée sont à portée de vos doigts.

## Stéthoscope Harvey™ Elite®

Le stéthoscope Harvey Elite offre un style nouveau, un confort supérieur et des capacités d'auscultation sur lesquels les cardiologues peuvent compter. Sa tête en acier inoxydable transmet les sons de manière nette et claire. Le stéthoscope Harvey Elite est doté d'un pavillon pédiatrique et est garanti 10 ans.

### Stéthoscopes Harvey™ Elite®

- 5079-122 Noir, 56 cm (22 pouces)
- 5079-125 Noir, 71 cm (28 pouces)
- 5079-270 Bordeaux
- 5079-271 Bleu marine
- 5079-284 Vert forêt

Le ressort trois sections de la branche est enveloppé dans du polyuréthane et permet d'ajuster la taille en évitant la casse

Nouvelle longueur de 71 cm (28 pouces)

Branches orientables et embouts auriculaires étanches et interchangeables pour votre confort

Pavillon en acier inoxydable double (cloche et membrane plate) avec bague anti-froid

Sans latex

5079-270 Stéthoscope Harvey Elite, bordeaux

### Quel est l'avantage d'un stéthoscope à deux tubes ?

Les stéthoscopes à deux tubes, comme le Harvey DLX et Elite, offrent un canal sonore individuel pour chaque oreille. Ceci vous permet d'entendre plus distinctement les caractéristiques subtiles des sons et souffles cardiaques. Les tubes plus lourds filtrent également le bruit distrayant typique d'un environnement en mouvement.

Les stéthoscopes Welch Allyn Harvey disposent d'une cloche et d'une membrane pour isoler facilement les sons haute fréquence (membrane) et basse fréquence (cloche). Certains stéthoscopes ne disposent que d'une membrane uniquement. Les stéthoscopes Harvey disposent de branches réglables pour un confort adapté à chacun.



## Stéthoscopes pour diagnostic général

### Clarté acoustique excellente et durabilité

Les stéthoscopes de diagnostic général Welch Allyn offrent une excellente qualité sonore, la durabilité et le confort au professionnel de la médecine. Leur acoustique permet une auscultation précise des sons cardiaques, pulmonaires et vasculaires.

### Stéthoscopes professionnels pédiatriques et pour adulte

Excellent pour l'auscultation générale et la mesure de la pression artérielle


- Version à double pavillon
- Versions adulte et pédiatrique disponibles
- Pavillon et branches en acier inoxydable
- Branches orientables et embouts auriculaires étanches et interchangeables pour votre confort
- Sans latex
- 5 ans de garantie

Stéthoscopes professionnels pour adulte — 71 cm (28 pouces)

	5079-135 Noir
	5079-137 Bleu marine
	5079-289 Bleu
	5079-139 Bordeaux
	5079-285 Vert forêt

Stéthoscopes professionnels pédiatriques — 71 cm (28 pouces)

	5079-145 Noir
	5079-149 Bordeaux
	5079-147 Bleu marine
	5079-287 Vert forêt

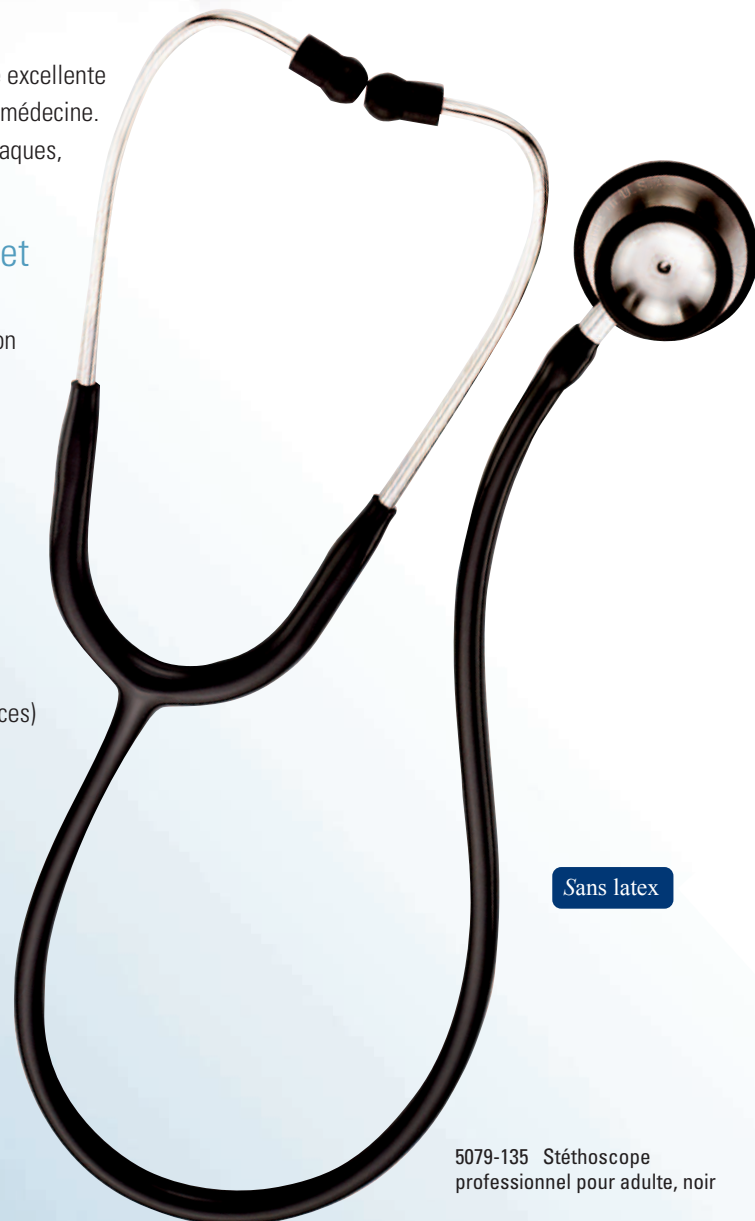

Sans latex

5079-135 Stéthoscope professionnel pour adulte, noir

## Stéthoscopes pour diagnostic général








Sans latex

### Planoscop

Planoscop dispose d'une membrane ultra-mince de 40 mm idéale pour écouter les sons de Korotkoff.

- Version à pavillon unique
- Sans latex
- Membrane ultra-mince
- 2 ans de garantie
- Branches réglables

Stéthoscopes pour adulte Planoscop —  
78 cm (31 pouces)

	83-11-080 Noir
	83-11-060 Jaune
	83-11-040 Rouge
	83-11-020 Bleu
	83-11-030 Vert








Sans latex

### Duophon

La version légère à double pavillon Duophon dispose d'une membrane de 40 mm et d'une cloche pour une acoustique excellente.

- Version à double pavillon
- Branches réglables
- Plaqué chromé
- Sans latex
- Acoustique excellente
- 2 ans de garantie

Stéthoscopes pour adulte Duophon —  
78 cm (31 pouces)

	82-11-080 Noir
	82-11-060 Jaune
	82-11-040 Rouge
	82-11-020 Bleu
	82-11-030 Vert

## Stéthoscopes jetables





### Uniscope








Stéthoscope conçu pour utilisation sur un seul patient pour des situations qui présentent des risques de contamination, le stéthoscope jetable Uniscope de Welch Allyn vous permet d'établir des diagnostics précis sans compromettre votre stéthoscope principal. L'Uniscope est excellent pour une auscultation générale, une version pédiatrique bleu clair est également disponible.

- Simple pavillon
- Tubes sans latex
- Pavillon et branches en plastique

Stéthoscopes jetables

	17461 Adulte, jaune
	17462P Pédiatrique, bleu clair

# Spécifications des stéthoscopes Welch Allyn

	ÉLECTRONIQUE	CARDIOLOGIE			DIAGNOSTIC GÉNÉRAL				JETABLE
DESCRIPTION DU PRODUIT									
RÉF. PRODUIT	5079-405 Stéthoscope 5079-430 Analyseur 5079-401 Répartiteur	<b>Double pavillon</b> 5079-325 Noir 5079-326 Bordeaux 5079-327 Marine <b>Triple pavillon</b> 5079-321 Noir 5079-322 Bordeaux 5079-323 Marine	5079-122 Noir (56 cm / 22 po) 5079-125 Noir 5079-270 Bordeaux 5079-271 Marine 5079-284 Vert forêt	5079-135 Noir 5079-137 Marine 5079-289 Bleu 5079-139 Bordeaux 5079-285 Vert forêt	5079-145 Noir 5079-147 Marine 5079-149 Bordeaux 5079-287 Vert forêt	83-11-080 Noir 83-11-060 Jaune 83-11-040 Rouge 83-11-020 Bleu 83-11-030 Vert	82-11-080 Noir 82-11-060 Jaune 82-11-040 Rouge 82-11-020 Bleu 82-11-030 Vert	17461 Adulte, jaune 17462P Pédiatrique, bleu clair	
TYPE DE PRODUIT	Stéthoscope électronique	Double pavillon / Triple pavillon	Double pavillon	Double pavillon	Double pavillon	Simple pavillon	Double pavillon	Simple pavillon	
DIAMÈTRE DU PAVILLON	38,5 mm (1,5 pouces)	48,3 mm (1,9 pouces)	48,3 mm (1,9 pouces)	45 mm (1,75 pouces)	30 mm (1,2 pouces)	40 mm (1,6 pouces)	40 mm (1,6 pouces)	49 mm (1,9 pouces)	
LONGUEUR TOTALE	825,5 mm (32,2 pouces)	711 mm (28 pouces)	711 mm (28 pouces)	711 mm (28 pouces)	711 mm (28 pouces)	780 mm (30,7 pouces)	780 mm (30,7 pouces)	770 mm (30,3 pouces)	
LONGUEUR DES TUBES	546,1 mm (21,5 pouces)	431,8 mm (17 pouces)	431,8 mm (17 pouces)	546,1 mm (21,5 pouces)	546,1 mm (21,5 pouces)	600 mm (23,6 pouces)	600 mm (23,6 pouces)	600 mm (23,6 pouces)	
SANS LATEX (O/N)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
MATIÈRE DU PAVILLON	Plastique	Laiton	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Laiton plaqué chromé	Laiton plaqué chromé	ABS	
MATIÈRE DE LA MEMBRANE	Plastique	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate	PVC	PVC	Polypropylène	
STYLE DE MEMBRANE	Plate	Plate / Ondulée	Plate / Ondulée	Plate	Plate	Plate	Plate	Plate	
BRANCHE RÉGLABLE (O/N)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	
EMBOUTS AURICULAIRES (MOUS / DURS)	Mous	Mous / Durs	Mous / Durs	Mous / Durs	Mous / Durs	Durs	Durs	Durs	
EMBOUTS AURICULAIRES LAVABLES	Écouvillons à l'alcool ou à la chlorhexidine	Alcool ou eau légèrement savonneuse	Alcool ou eau légèrement savonneuse	Alcool ou eau légèrement savonneuse	Alcool ou eau légèrement savonneuse	Alcool ou eau légèrement savonneuse	Alcool ou eau légèrement savonneuse	—	
TYPE DE TUBES (SIMPLE / DOUBLE LUMEN)	Simple lumen	Double lumen	Double lumen	Simple lumen	Simple lumen	Simple lumen	Simple lumen	Simple lumen	
BAGUE ANTI-FROID	Non requis	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non requis	
DIAMÈTRE DE LA CLOCHE	—	28 mm (1,1 pouces)	36 mm (1,41 pouces)	36 mm (1,41 pouces)	26 mm (1,02 pouces)	32 mm (1,25 pouces)	—	—	
COLIS ASSEMBLÉS	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
EMBALLAGE	Boîte imprimée	Boîte imprimée	Boîte imprimée	Boîte imprimée	Boîte imprimée	Boîte imprimée	Boîte imprimée	Sac en plastique	
GARANTIE	1 an	10 ans	10 ans	5 ans	5 ans	2 ans	2 ans	—	

Pour plus d'informations, contactez votre représentant Welch Allyn local.

**Siège de la société Welch Allyn**  
4341 State Street Road  
P.O. Box 220  
Skaneateles Falls, NY 13153-0220  
États-Unis  
Téléphone : +1 315 685 4602  
ou +1 800 535 6663

**Service clientèle Europe de Welch Allyn**  
Navan Business Park, Dublin Road  
Navan, County Meath  
Irlande  
Téléphone France : +33 155 69 58 49  
Fax France : +33 155 69 58 50

**Welch Allyn France**  
Immeuble Le Galilée  
10 rue Fontaine Rouge, Val d'Europe  
77700 CHESSY  
Tél. : 01 60 09 33 66  
Fax : 01 60 09 67 97

**WelchAllyn®**

Advancing Frontline Care™

[www.welchallyn.com](http://www.welchallyn.com)