



Den Braun ThermoScan® PRO 4000-örontermometern

Den snabbhet och enkelhet du behöver för noggranna,
tillförlitliga temperaturavläsningar

BRAUN

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™



Den Braun ThermoScan® PRO 4000 — patenterad teknik som ger dig den snabbhet och noggrannhet du behöver med alla dina patienter, natt och dag.

- **Exklusiv ExacTemp™-teknik med ett aktivt användarfeedbackljus som anger att sonden har placerats stadigt under mätningen, vilket gör att du undviker inexakta mätningar på grund av felhantering**
- **Uppvärmad sondspets minskar nedkylningseffekten som sker i samband med upprepade temperaturmätningar, med större noggrannhet och bättre repeterbarhet som följd**
- **Sondskyddsdetektionsfunktionen försäkrar att ett nytt sondskydd alltid används, vilket ger bättre noggrannhet genom att försäkra exakt infraröd värmeöverföring**
- **Automatisk sondskyddsutstötningsknapp för snabb och smidig borttagning av använda sondskydd**
- **Innovativa säkerhetsfunktioner minskar risken för stöld i sjukhusmiljö (endast tillgänglig vid användning av laddningsbara batterier och basenhet)**

En del patienter har inte mycket tålamod när det är dags att ta tempen. Den ergonomiskt konstruerade Braun ThermoScan® PRO 4000-örontermometern är utformad för snabb och noggrann temperaturmätning genom ett tryck på knappen.

Enkel: En lättavläst LCD-skärm med ikoner som kommunicerar klart och tydligt på alla språk, och ett intuitivt användargränssnitt samt ergonomisk form.

Snabb och noggrann: Den enda örontermometern med uppvärmd sond och sensor för tillförlitliga avläsningar. Aktiv lysdiod för användarfeedback underlättar snabb och noggrann anatomisk placering.

Säker: Större patientsäkerhet tack vare en automatisk sondskyddsutstötningsknapp som minskar risken för korskontamination.

Stöldskydd: Skyddsfunktioner (tillval) som kan minska risken för stöld i sjukhusmiljö.



Uppvärmad sond- och sensorteknik för tillförlitliga avläsningar

Ett mjukt, komfortabelt sondskydd håller sondspetsen ren och bidrar till noggranna avläsningar

Automatisk sondskyddsutstötningsknapp för snabb och smidig borttagning av använda sondskydd


En tydlig minnesknapp gör det lätt att återkalla det senast mätta värdet

Ergonomisk konstruktion gör det lätt att använda termometern med patienter i alla åldrar

3-års begränsad garanti ger dig sinnesfrid under många års bruk



En tydlig LCD-skärm visar temperaturvärden i antingen Fahrenheit eller Celsius.

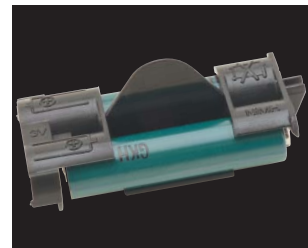

Kan användas med en laddningsbar batterienhet (enligt illustrationen)



Termometerns förvaringsbox håller 20 sondskydd och kan avlägsnas från basenheten och användas för lätt sondskyddsladdning med termometern.

Basenheten (tillval) har elektroniska säkerhetsfunktioner och kan användas för att ladda batterierna (när den används med de laddningsbara batterierna som medföljer basenheten) och för att förvara 200 sondskydd.

Den Braun ThermoScan® PRO 4000

Braun ThermoScan®

PRO 4000—höjer ribban

för standard ytterligare



Braun ThermoScan® PRO 4000-specifikationer

Kalibreringsnoggrannhet	±0,2 °C för termometern vid 35,5 – 42,0 °C
Responstid	3 – 7 sekunder
Mått	152 mm x 44 mm x 33 mm
Vikt (utan batterier)	100 gram
Omgivningstemperaturområde	10,0 – 40,0 °C
Patienttemperaturområde	20,0 – 42,2 °C
Strömkälla	(2) 1,5V AA-batterier för engångsbruk eller (2) laddningsbara AAA-batterier
Batterilivslängd	
Batterier för engångsbruk	Ca 6 månader eller 1000 mätningar
Laddningsbara batterier	Ca 500 mätningar per laddning eller 3 månaders standby-tid
Garanti	3-års begränsad garanti för instrumentet och 3-års begränsad garanti för basenheten

beställningsinformation

termometrar

- 04000-600** Braun ThermoScan® PRO 4000 örontermometer, 3-års begränsad garanti
- 04000-500** Braun ThermoScan® PRO 4000 örontermometer, med säkerhetsbasenhet, 3-års begränsad garanti

tillbehör

- 04000-700** Braun ThermoScan® PRO 4000-basenhet och sonda-skyddsdispenseringsanordning
- 53020-0000** Laddningsbar batterienhet för Braun ThermoScan® PRO 4000
- 53009-000** Alkaliska utbytesbatterier
- 80199-0001** Utbytesnätsladd för Braun ThermoScan® PRO 4000-basenhet

utbytessondskydd

- 04000-800** Braun ThermoScan® PRO 4000-utbytessondskydd (förpackning med 800 sondskydd)

Welch Allyn Sverige,
Verkstadsgratan 12, 263 39 Höganäs
Tel: 042-330 220 Fax: 042-333 210
Hemsida www.welchallyn.se

BRAUN
Ring Welch Allyn för att beställa
Braun ThermoScan® PRO 4000
4341 State Street Road, PO Box 220,
Skaneateles Falls, NY 13153-0220, USA
Tel: 800 535 6663 • Fax: 315 685 3361
www.welchallyn.com

WelchAllyn®
Advancing Frontline Care™